

SORDINA

technology serving life



Sordina Medical Technologies S.r.l.

Tel +39 0444 233750 - Fax +39 0444 233790
info@sordina.com - www.sordina.com

Registered Office

Galleria Pozzo Rosso 13
36100 Vicenza, Italy
REA VI-357804

STS
Tavolo Operatorio

Soluzioni d'alta tecnologia
applicata al nostro
più versatile Tavolo Operatorio




Da oltre 140 anni Sordina mette al servizio delle equipe mediche e dei loro pazienti il proprio know-how realizzando tavoli operatori di alta qualità capaci di durare nel tempo soddisfacendo molteplici esigenze. Rispondendo a precise necessità espresse dai team di sala operatoria, con passione italiana e visione globale, Sordina ha sviluppato una nuova generazione di tavoli operatori capaci di offrire un alto rendimento tecnico. Il nuovo tavolo ST5 è perfettamente in grado di soddisfare le esigenze del team di sala offrendo uno straordinario rapporto qualità prezzo. Il tavolo ST5 offre alte prestazioni tecniche ad un prezzo competitivo. Grazie alla storica ed affermata esperienza Sordina il tavolo ST5 viene offerto con un cuore elettroidraulico preciso, solido e durevole.

Tecnologia per la vita, la nuova generazione

I materassini antistatici,
radiotrasparenti e latex free

Telecomando
via cavo

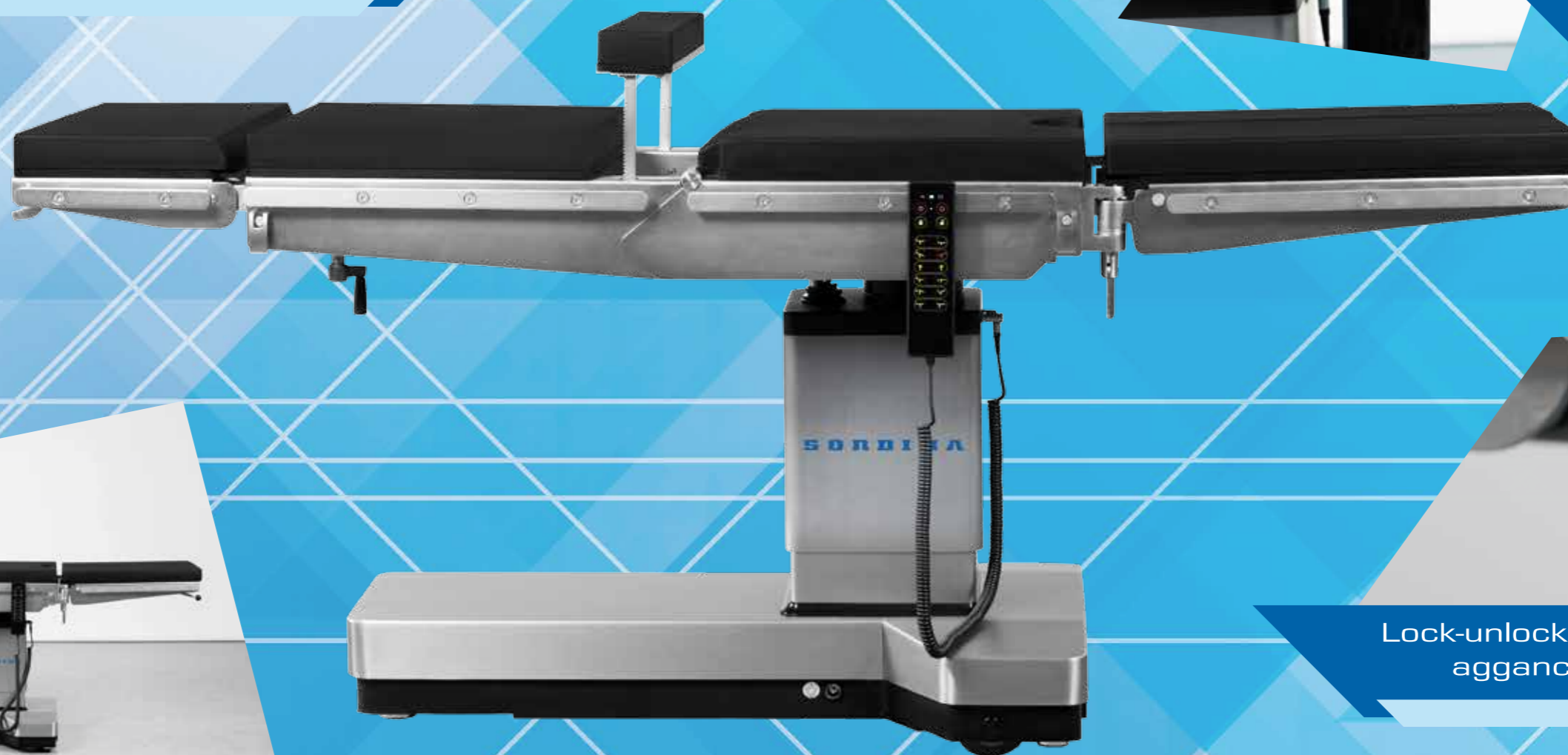

Lock-unlock rapido sistema
aggancio/sgancio

Il piano operatorio è traslabile per
un'ottimale radiotrasparenza




Tecnologia per la vita, la nuova generazione



Testiera a doppia regolazione



Kidney bridge

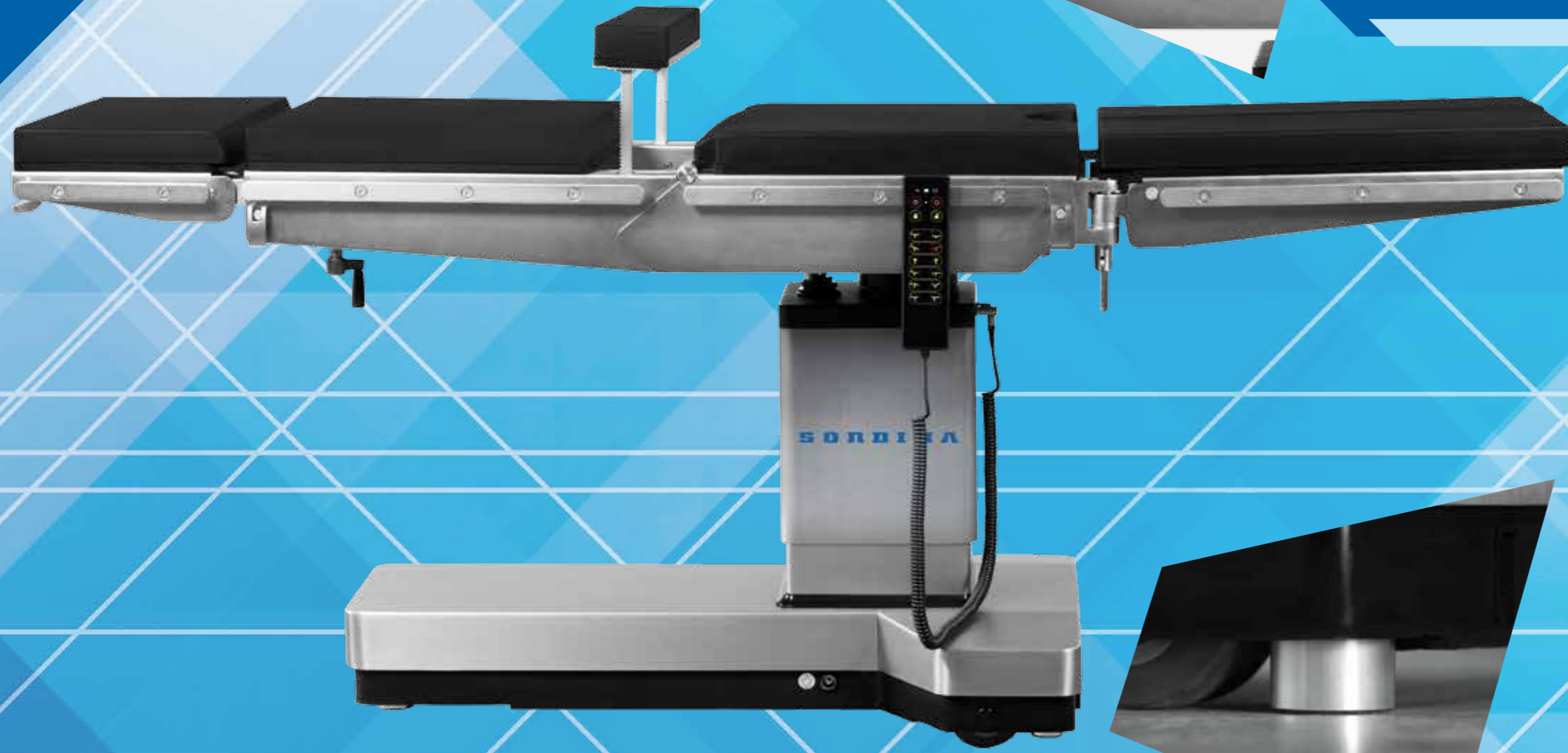

Sistema elettro-idraulico di bloccaggio a pavimento

Tecnologia per la vita, la nuova generazione

I piani operatori sono a sezioni modulari intercambiabili, realizzati in acciaio inox.


Il materiale costruttivo del piano operatorio garantisce un'elevata resistenza meccanica, ottima resistenza alla corrosione e pesi estremamente ridotti per assicurare un'estrema facilità di trasferimento delle varie sezioni del piano.

Inoltre, l'assenza di saldature, sporgenze ed ingombri meccanici garantisce superfici estremamente lisce rendendo le operazioni di pulizia e disinfezione più semplici. Le movimentazioni elettroidrauliche del tavolo operatorio garantiscono una migliore rigidità e solidità del sistema, minore presenza di giochi meccanici ed una maggiore fluidità e precisione dei movimenti.



Tecnologia per la vita, la nuova generazione

SPECIFICHE TECNICHE

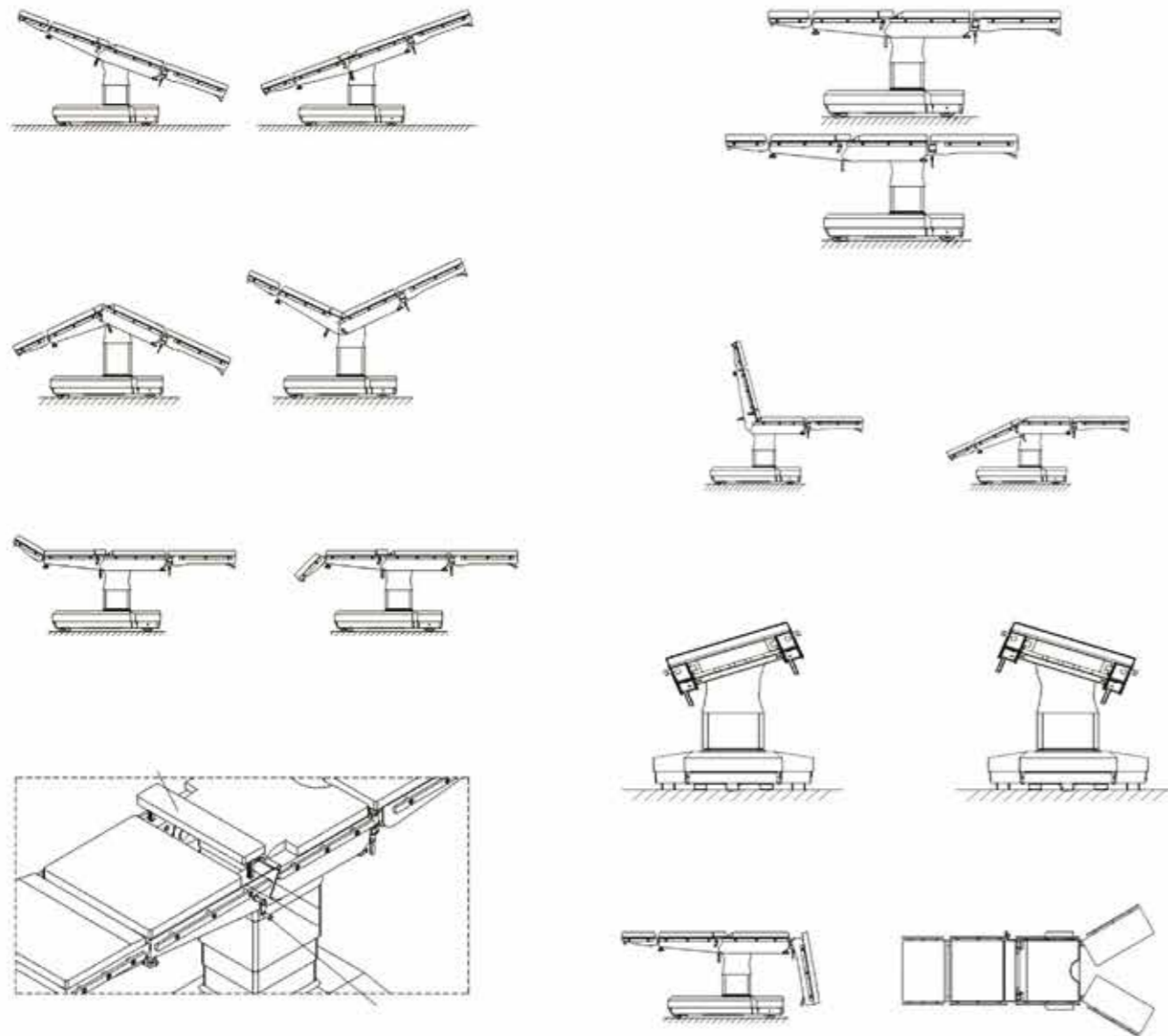


Lunghezza piano	2020 mm
Larghezza piano (senza binari)	520 mm
Altezza (senza materassini)	680 mm-940 mm
Trendelenburg/anti Trendelenburg	30°/30°
Tilt laterale (sx/ dx)	20°/20°
Inclinazione sezione schiena	75°/25°
Inclinazione sezione testa	30°/45°
Inclinazione sezione gambe	5°/90°
Divaricazione sezione gambe	180°
Kidney bridge	136 mm
Traslazione longitudinale	300 mm
Portata massima	297 Kg

Tecnologia per la vita, la nuova generazione



I piani gambe prevedono molteplici configurazioni

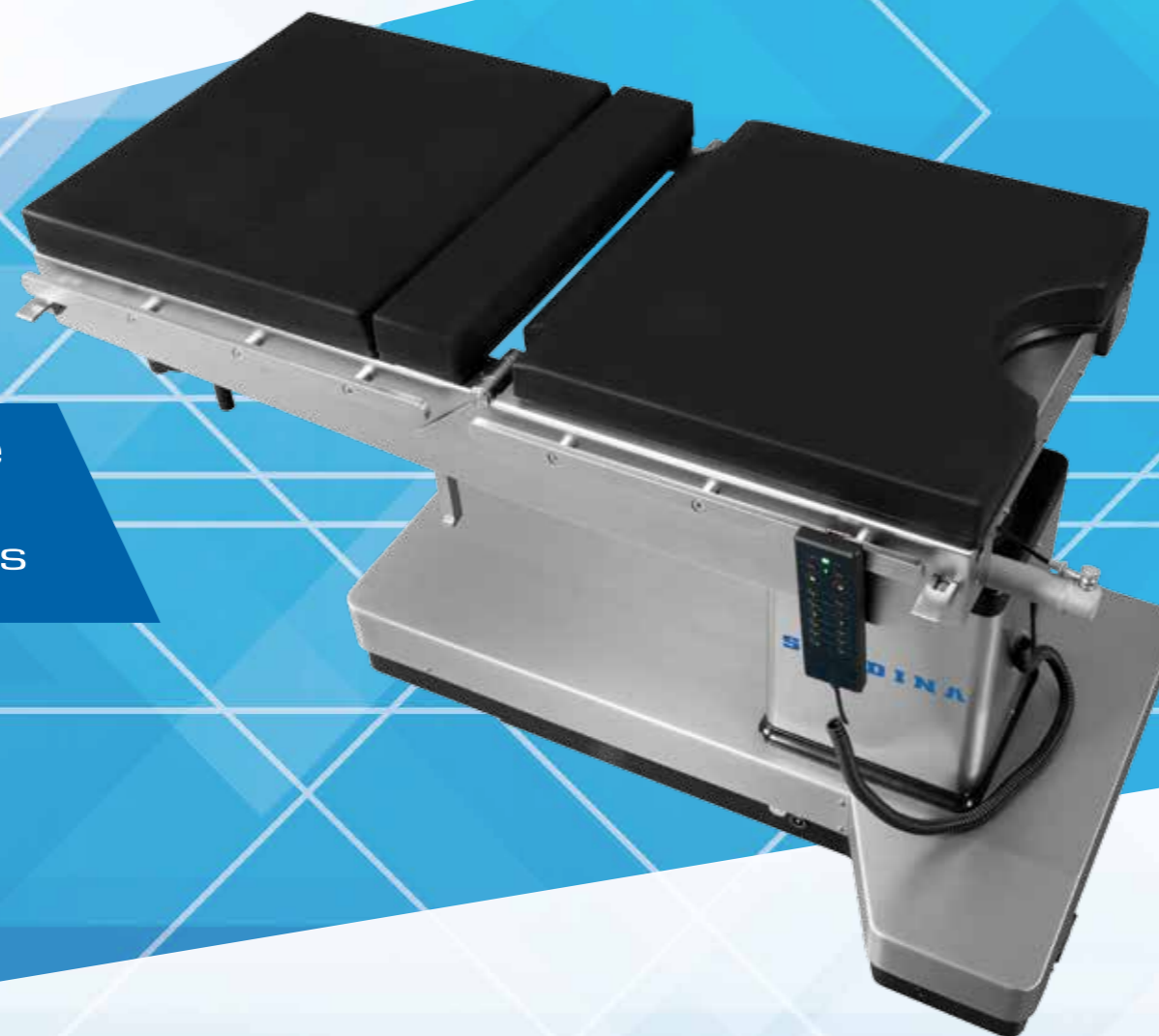


I piani gambe sono dotati di movimentazione manuale assistita con molle a gas

I pianitesta a doppia regolazione sono dotati di movimento manuale assistita con molle a gas


Tecnologia per la vita, la nuova generazione



kidney bridge

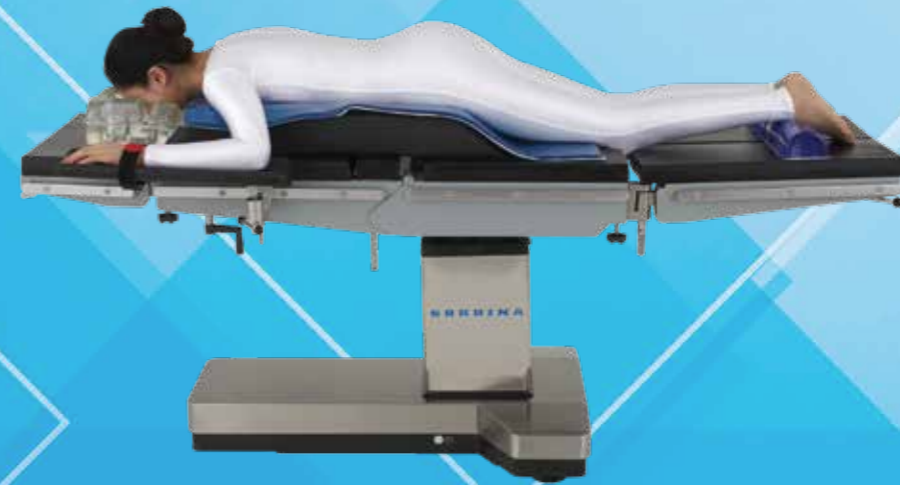

chirurgia spinale

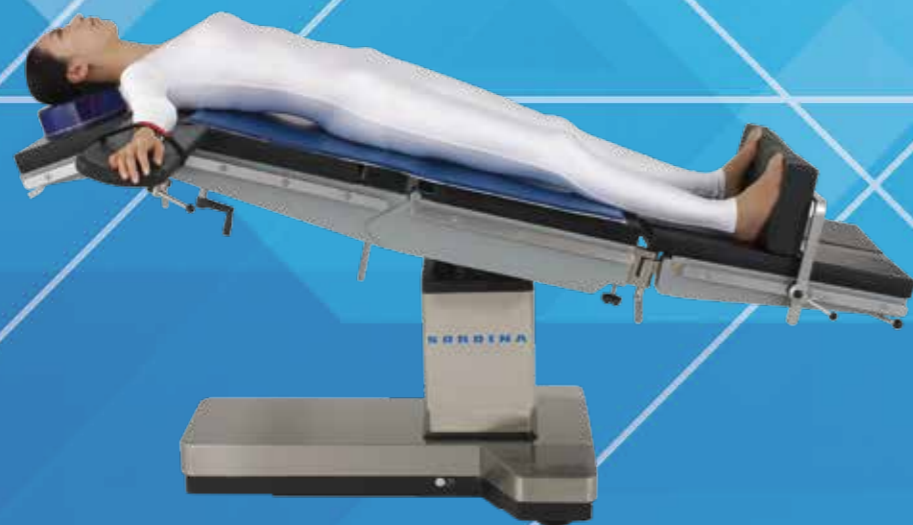

chirurgia toracica



neurochirurgia in posizione prona



chirurgia ginecologica / urologia



chirurgia genopettorale



chirurgia ortopedica



chirurgia ortopedica posizione laterale



chirurgia del ginocchio



neurochirurgia

I SERVIZI DI ASSISTENZA SORDINA

Il servizio di assistenza Sordina, assicura interventi d'emergenza in tempi brevissimi grazie alla capillare rete di tecnici altamente qualificati presenti sul territorio. Contattando il service department Sordina sarà possibile individuare la miglior formula service scegliendo tra varie opzioni quali manutenzione programmata e full risk.

Numero Assistenza
+39 0444 233 750

service@sordina.com

QUALITA' GARANTITA E CERTIFICATA DAL 1875

- Tutti i prodotti Sordina sono progettati e realizzati secondo la Direttiva 93/42/CEE.
- Il Sistema di qualità aziendale è conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485 per cui Sordina ha da tempo ottenuto la certificazione.
- Gli accessori, studiati dal dipartimento ricerca e sviluppo Sordina in collaborazione con i più affermati centri clinici, ed i ricambi originali sono coperti da garanzia e sottoposti al controllo qualità.
- A garantire pienamente l'alto livello dei prodotti Sordina, sono infine i nostri tecnici specializzati, competenti ed esperti, supportati dalla costante attività di formazione aziendale e dalla lunga ed ineguagliabile tradizione Sordina. Una tradizione ultracentenaria che oggi si coniuga con le capacità di un nuovo e dinamico management per rispondere in modo sempre attento e personalizzato a tutte le molteplici esigenze dei nostri clienti attuali e futuri.